HP版

# バージョンアップ手順書 2021 年 5 月 - 不具合修正版

#### く対象システム>

あさがお I、あさがお I、あやめ、ききょう、ききょう I、ききょう I のにな I のにな I 、カルビア、すいせん、スイートピー I 、すみれ、たんぽぽ、つくし、なのはな I 、なのはな I 、ひまわり、ひまわり Lite、フリージア、もみじ、ラベンダー

現在お使いのシステムを最新バージョンにするための差し替え手順書です。差し替えを行う前に、この内容を確認してください。

## おおまかな手順

- I. バージョンの確認
- Ⅱ. バックアップ
- Ⅲ. パソコンの再起動、セキュリティ解除
- IV. バージョンアップ作業IV-1. データのバージョンアップIV-2. システムのバージョンアップ
- V. バージョン確認
- VI. 添付書類の閲覧・印刷

※本手順書で使用している画面は、実際の画面と一部異なる場合がございます。



注意

手順Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ-2、Vは、すべての パソコンで行ってください。

ご不明な点等がございましたら、コンダクトサポートセンターまでお問い合わせください。

※電話が大変繋がりにくくなることが予想されますので、FAXもご利用ください。

TEL 0120-036-653 FAX 076-296-3369

## 注意事項

1. バージョンアップの前に必ずバックアップをおとりください。

※ひまわり Lite はバックアップ不要です。

2. バージョンアップは、必ず管理者権限で行ってください。

管理者権限で行わないとバージョンアップがうまく行われません。必ず管理者権限のユーザでログインしてから作業を行ってください。

#### <管理者権限の確認方法>

- ① 「スタート」メニューのアプリー覧から「Windows システムツール」→「コントロールパネル」を開きます。 (Windows 8. 1 の場合は「スタート」を右クリックし「コントロールパネル」をクリックします。)
- ② 「ユーザーアカウント」(Windows8.1の場合は「ユーザーアカウントとファミリーセーフティ」)をクリックします。
- ③ 「ユーザーアカウント」をクリックします。
- ④ 現在ログオンしているアカウントの種類が「Administrator」となっていることを確認してください。



3. すべてのパソコンでバージョンアップを行ってから、システムを使用してください。

バージョンアップを行ったシステムと行っていないシステムが混在していると、データの整合性が失われ集計ができなくなる可能性があります。 複数システムをご使用の場合は、全てのシステムのバージョンアップが終了するまで、システムを使用しないでください。

4. バージョンアップは、2種類(データ + システムの種類分)のファイルをダウンロードする必要があります。


ホームページから次のファイルをダウンロードしてください。

・データ (NEXT\_Kaisei210526\_data.exe) ・システムごとのバージョンアップ (NEXT\_Kaisei210526\_システム名.exe)

- 5. ひまわり Lite の注意点
  - ・ひまわりに入力データのアップロードを行ってから、ひまわり Lite のバージョンアップを行ってください。ひまわりとひまわり Lite のバージョン アップ後に、再度ダウンロードをしてお使いください。
  - ・ひまわりとひまわり Lite のバージョンは揃えてから、お使いください。バージョンが揃っていない場合、データのダウンロード・アップロードに 失敗する事がございます。(バージョンアップ時、バージョン確認の際に同期ツールが表示される事がございます。必ず、バージョンが揃っている 事を確認し、同期を行ってください。)
  - ・ひまわり Lite がインストールされている PC 全台で、 $\mathbb{N}-1$  データのバージョンアップ、 $\mathbb{N}-2$  システムのバージョンアップが必要です。

## バージョンアップ手順

I. バージョンの確認

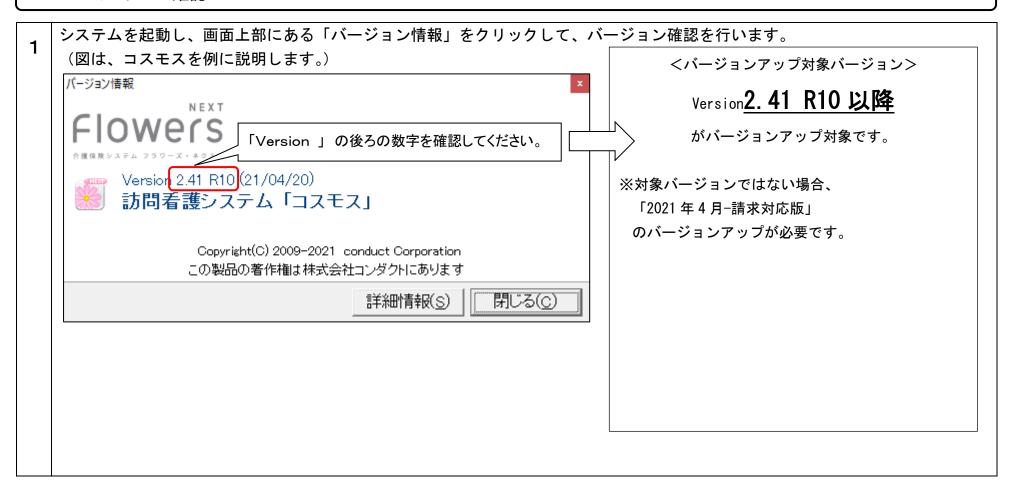

- Ⅱ. バックアップ ※ひまわり Lite では不要です。
- **」** バックアップを行ってください。
  - ①デスクトップにある「Flowers NEXT バックアップ」をクリックします。
  - ②バックアップメイン画面が表示されるので、「バックアップ」をクリックします。
  - ③【開始】をクリックし、バックアップを行ってください。



#### Ⅲ. パソコンの再起動、セキュリティ解除

▲ │FlowersNEXTを使用しているすべてのパソコンを再起動してください。

、|Windows ファイアウォールの無効、セキュリティソフトの停止を行います。

- ◆Windows ファイアウォールの無効
  - ①「スタート」メニューのアプリー覧から「Windows システムツール」→「コントロールパネル」を開きます。(Windows 8.1 の場合は「スタート」を 右クリックし「コントロールパネル」をクリックします。)
- ②「システムとセキュリティ」>「Windows Defender ファイアウォール」(Windows8.1の場合は「Windows ファイアウォール」) をクリック。
- ③「Windows Defender ファイアウォールの有効化または無効化」をクリックし、2 か所の「Windows Defender ファイアウォールを無効にする」に チェックを入れ、「OK」をクリックします。
- ※バージョンアップが完了しましたら、「Windows Defender ファイアウォールを有効にする」にチェックを入れて「OK」をクリックします。
- ◆セキュリティソフトの停止(セキュリティソフトをお使いの場合) 通常は画面の右下にセキュリティソフトのアイコンが表示されています。そのアイコンを右クリックして停止(または、無効)をクリックします。 上記の方法で停止できない場合は、セキュリティソフトのサポートセンターにお問い合わせください。

#### Ⅳ.バージョンアップ作業

#### <手順>


- Ⅳ-1. データのバージョンアップ (サーバ機)・・・5ページ
- Ⅳ-2. システムのバージョンアップ (サーバ機・クライアント機)・・・10ページ
- ※起動しているすべての Flowers NEXT を終了した後、作業を行ってください。

## IV -1. データのバージョンアップ%1 サーバ機で行ってください。 %2 ひまわり Lite がインストールされている PC は全台で必要

ダウンロードしたファイルを解凍します。

① 「NEXT\_Kaisei210526\_data.exe」をダブルクリックします。

-

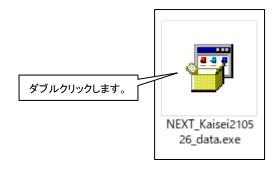

② 確認メッセージが表示されるので、お使いのシステムが入っているパソコンすべての Flowers NEXT のシステムを終了し、【はい】をクリックします。



③ 「展開先の指定」画面が表示されるので、プログラムを解凍する場所を指定し【OK】 ボタンをクリックします。




**補足** ホームページからダウンロード時に、「実行」を クリックした場合は、②の画面が表示されます。 (①の手順は、飛ばしてください)

**補足** Windows8.1 で、次の画面が表示される場合は、 「詳細情報」をクリックし、



「実行」をクリックしてください。

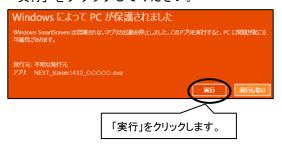


2 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」と 確認メッセージが表示されるので、【はい】をクリックします。




注意 ※FlowersNEXT が起動されている場合、下記のようなメッセージが表示されます。

表示されているパソコンのシステムを終了し、 【はい】をクリックしてください。

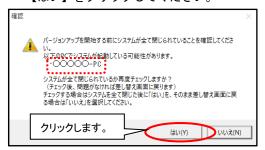

3 メニューが表示されるので、「データのバージョンアップ」をクリックし、右側の「データのバージョンアップ開始」をクリックします。

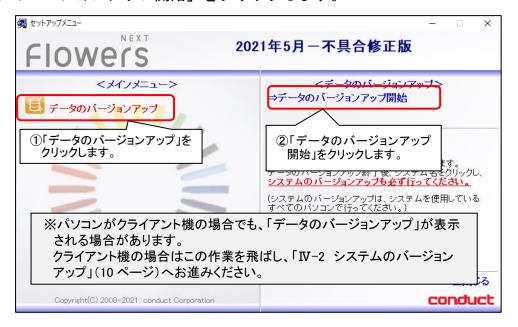

| **注意** | 「データのバージョンアップ開始」クリック後、以下のメッセージが表示される場合があります。


お使いの「データ」は、差し替え対象のバージョンではありません。対象のバージョンに差し替えて、再度行ってください。

→【OK】をクリックし3ページに戻ってください。


「データ」のバージョンアップは既に完了しています。 再度、バージョンアップを行いますか?

【はい】 【いいえ】

- ・既にバージョンアップを行っている場合
- →【いいえ】をクリックし、メニューに戻ります。 10ページの手順に進んでください。
- ・バージョンアップが前回失敗で終わっている場合
- → 【はい】をクリックし、次ページの手順に進ん でください。

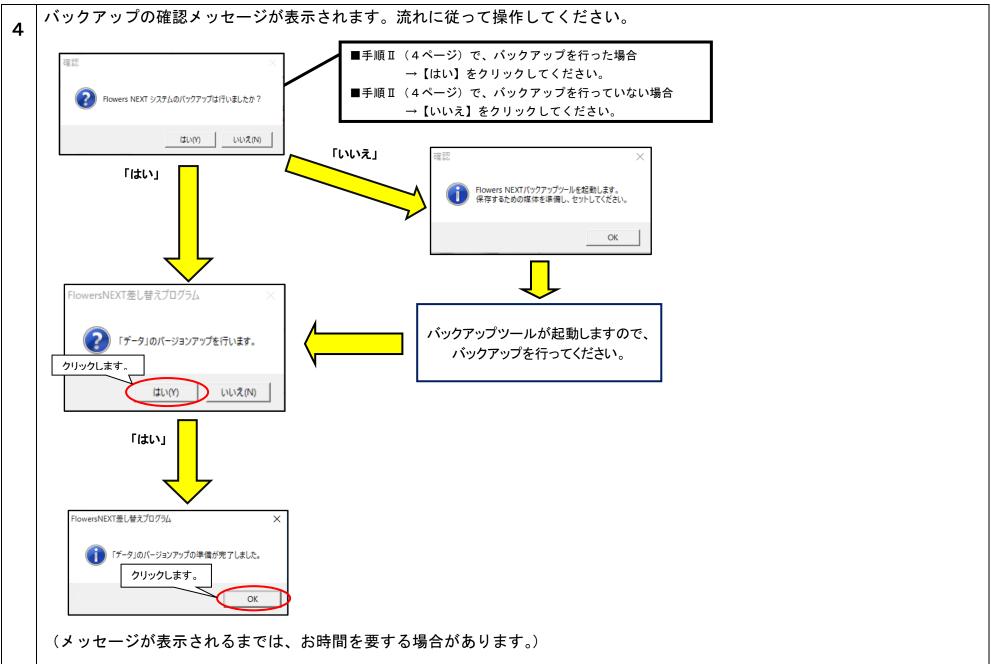

5 「データベースコンバータ」画面が表示されますので、タイトルを確認し、【次へ】を クリックします。

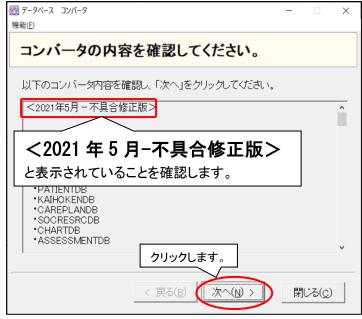

コンバータを開始します。【開始】をクリックします。

6



※コンバート処理中にコンバート処理結果が表示された場合は、印刷し(【印刷プレビュー】)、 【閉じる】をクリックしてください。

<体制履歴コンバート処理結果の例>



- ※画面は複数回表示される場合が あります。
- ※「コンバータ処理結果」は、 バージョンアップがすべて終わった 後に確認してください。

**補足** すでにコンバータを行っている場合、以下のメッセージが表示されます。

『2021 年 5 月-不具合修正版』のコンバータは全て正常に完了しています。再度、コンバータを実行する場合は、「再コンバートする」にチェックを付けて開始してください。そのまま終了する場合は、画面を閉じてください。

[OK]

→【OK】をクリックし、【閉じる】をクリックします。 10ページの手順に進んでください。

『2021 年 5 月-不具合修正版』のコンバータは前回、失敗で終了しています。

「再コンバートする」にチェックを付けて開始してください。

[OK]

→【OK】をクリックし、システムが起動していないことを確認します。左側の手順 6 の画面にて「再コンバートする」にチェックを入れて、【開始】ボタンをクリックしてください。

補足 コンバート中に下記メッセージが表示された場合 は、コンバートが失敗しています。

「データベース' FLOWERS\_HOKENMASTERDB01' は現 在使用中なので、デタッチできません。

[OK]


- →すべて終了し、パソコンを再起動し、4ページの手順皿から行ってください。
- 補足 「コンバータ処理結果」は、パソコン内にファイル として保存されますので、バージョンアップがすべて終わった後に確認してください。

【保存先フォルダ】 C:¥CONDUCT\_SAVEDATA ¥差し替え ¥データベースコンバータ処理結果 ¥2021 年 5 月-不具合修正版

フ コンバータ処理が終わるとメッセージが表示されますので、【OK】をクリックします。



画面枠内の結果が「更新済みです。」または「完了しました。」 と表示されていることを確認し、【閉じる】をクリックして画面を閉じてください。

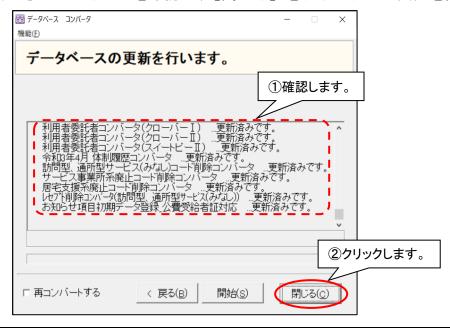

注意

一項目でも「失敗しました」と表示された場合は、システムを正常に使用できません。サポートセンターまでお問い合わせください。

コンバータ全体の処理結果は、パソコン内に ファイルとして保存されます。後で確認する こともできます。

【保存先フォルダ】 C:¥CONDUCT\_SAVEDATA ¥差し替え ¥データベースコンバータ処理結果 2021 年 5 月-不具合修正版

【ファイル名】


2021 年 5 月-不具合修正版コンバータ処理 結果(日時).txt

以上で、データのバージョンアップは終了です。

### **IV-2**. **システムのバージョンアップ** ※この作業はシステムを使用しているすべてのパソコンで行ってください。

↓ ダウンロードしたファイルを解凍します。(コスモスを例に説明します。)


● NEXT\_Kaisei210526\_システム名. exe (システムがコスモスの場合 NEXT Kaisei210526 cosmos. exe をダブルクリックします。)

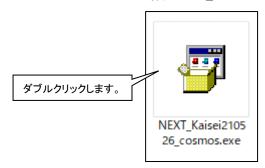

● 確認メッセージが表示されるので、お使いのシステムが入っているパソコン すべての Flower sNEXT のシステムを終了し【はい】をクリックします。



● 「展開先の指定」画面が表示されるので、プログラムを解凍する場所を指定し「OK」ボタンをクリックします。

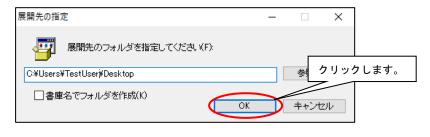


| ※連動している他システムがある場合は、他シス | テムのバージョンアップも行ってください。

2 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」と 確認メッセージが表示されるので、【はい】をクリックします。



※FlowersNEXTが起動している場合、下記メッセージが表示されます。 表示されているパソコンにてシステムを終了し、【はい】をクリックしてください。

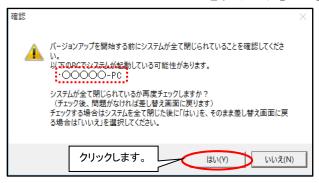

【補足】Windows8.1の場合、


「次のプログラムにこのコンピュータへ の変更を許可しますか?」とメッセージが 表示されますので、「はい」をクリックし ます。

Copyright (C) 2021 conduct Corporation page 11/13

セットアップメニューが表示されるので、右側の「バージョンアップ開始」をクリッ 3 クします。



「展開先の指定」画面が表示されるので、「OK」をクリックします。

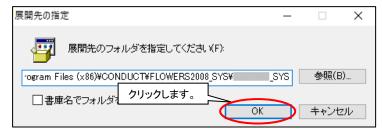

進捗状況画面が表示され、すぐに画面が消えます。

セットアップメニューの「閉じる」をクリックします。

※複数のパソコンでお使いの場合は、すべてのパソコンでシステムのバージョンアップを行って ください。

注意

サーバ専用パソコンの場合、メインメニュ 一にシステム名が表示されない場合があ ります。システム名が表示された場合は、 バージョンアップを行ってください。

「バージョンアップ開始」クリック後、次 注意 のメッセージが出る場合があります。

お使いの「<システム名>」は、差し替え対象バージョンで はありません。対象のバージョンに差し替えて、再度行っ てください。

LOK1

→「OK」をクリックし、3ページに戻り、 バージョンの確認から行ってください。

「〈システム名〉」のバージョンアップは既に完了しています。 再度、バージョンアップを行いますか?

「はい」(「いいえ」

→「いいえ」をクリックしてください。 次のページに進んでください。

以上で、システムのバージョンアップは終了です。

4

page 12/13 Copyright (C) 2021 conduct Corporation

#### V. バージョン確認

1 システムを起動し、画面上部にある「バージョン情報」をクリックして、バージョン 確認を行います。



システム起動時に以下のメッセージが 表示された場合は、「IV-1. データのバー ジョンアップ」(5ページ)を行ってく ださい。



※バージョンアップを行ったにもかかわらず、バージョンが更新されない場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。

#### VI. 添付書類の閲覧・印刷

1 添付書類がパソコン内に保存されています。「Ver. 2. 41R20」のフォルダの書類を開いて、確認してください。



Adobe Acrobat ReaderDCの画面が表示され書類の閲覧ができます。 印刷する場合は、プリンタマークをクリックしてください。



補足 添付書類には、変更になった機能や操作の説明、注意事項などを記載しております。必ずお読みください。

Adobe Acrobat ReaderDC がインストールされていない場合、添付書類を確認することができません。インターネット等からダウンロードし、インストールしてください。

補足 添付書類はメニューからも閲覧・印刷することができます。



以上で、バージョンアップ作業は完了です。